

Repetman®


Motorizovaná opakovací positive - displacement pipeta

Vlastnosti

- Široký rozsah dávkovaných objemů od 1 µl do 50 ml včetně nestandardních jako např. 7,5 µl, 156 µl nebo 9,54 ml.
- Vhodný i pro problémové kapaliny stejně jako Microman.
- Jednoduché a intuitivní ovládání, tři operační módy: opakované dávkování, automatické opakované dávkování a pipetování.
- Tři rychlosti nasávání a tři pro vypouštění.
- Zobrazuje počet zbývajících dávek.
- Splňuje požadavky ISO 8655.
- Kompatibilní s většinou stříkaček jiných výrobců.
- Dobíjecí NiMH akumulátor, automatické dobíjení baterie vložení Repetmanu do nabíjecího stojánu.
- Snadná výměna náhradního akumulátoru, který možné i samostatně dobít přímo v dobíjecím stojánu.

Více než pohodlné ovládání

- Ergonomický tvar, příjemný do každé ruky, zvyšuje uživatelský komfort.
- Automatické rozpoznávání velikosti stříkačky díky kódovaným dřívům pístu.
- Učící funkce – monitorovací technologie zaznamená pipetovací rytmus operátora a pipeta nadále automaticky dávkuje v nastaveném rytmu.

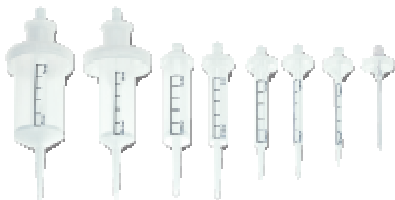

Rozsah

- 8 velikostí od 0,1 ml do 50 ml v nesterilním i sterilním balení.
- Rozsah dávkovaných objemů od 1 µl do 50 ml.
- Sterilní stříkačky jsou individuálně baleny s certifikátem na nepřítomnost endotoxinů.

Doplňující informace

- Adapter pro nástavce 25 ml a 50 ml lze autoklávat a je součástí každého balení. Lze jej objednat samostatně v balení po 5-ti ks.
- Repet-Tips NEJSOU autoklávatelné.
- Objednejte si rezervní akumulátor pro nepřetržitý provoz a dlouhou životnost akumulátorů dosažené plným využitím celých nabíjecích cyklů



REPETMAN	Objednací číslo
REPETMAN, EU zásuvka (230V / 50Hz)	F164501
REPETMAN, US zásuvka (110V / 50-60Hz)	F164502
REPETMAN, UK zásuvka (230V / 50Hz)	F164503
REPETMAN, Australská zásuvka (240V / 50Hz)	F164504
NiMH akumulátor	F164595