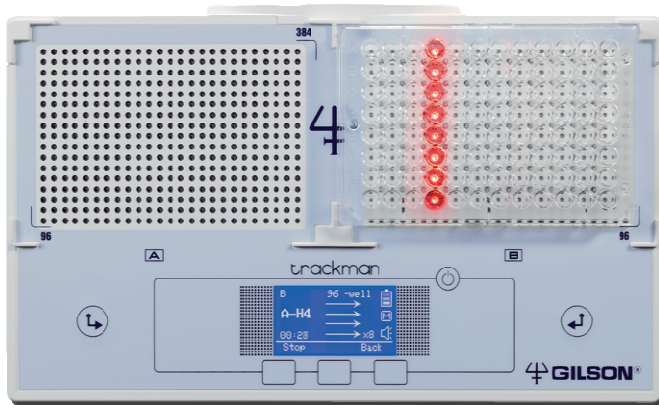
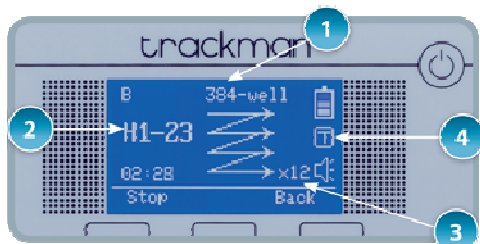


**Trackman™**
*Spolehlivý a účinný pomocník*


Tento osobní laboratorní pomocník pomáhá zajistit spolehlivý postup při, na pozornost velmi náročném, pipetování do mikrodestiček. Zjednodušuje práci, zvyšuje produktivitu a pomáhá eliminovat chyby a křížovou kontaminaci.

**Přesné a správné měření**

- 16 programovacích variant pro trasování (řádky, sloupce, typy pipet, destiček atd).
- Časovač umožňující bezkontaktní práci.
- Možné přerušení práce i krokování zpět.
- Možné rozšíření o nožní pedál.

**Jednoduché ovládání**


Intuitivní uživatelské rozhraní.

- 1. typ destiček 96, 384, mikrozkumavky
- 2. indikátor – souřadnice aktuální pozice
- 3. typ pipety – 1, 8, 12 kanálů
- 4. časovač

- 16 programovacích variant trasování pro různé aplikace.
- Různé tvary trasování.

**Více než pohodlné ovládání**

- Pomáhá sledovat postup i při plnění dvou destiček – můžete libovolně přerušit práci a po návratu můžete začít přesně tam, kde jste skončili.
- Je použitelný pro 96 a 384 pozici destičky, pro jedno i multikanálové pipety.
- Jednoduchá změna z jednoho typu destičky na druhý bez dalšího příslušenství.
- Vestavěné Li-Ion akumulátory zvládnou až 8 hodin po plném nabití.
- Přenosný, tenký, malý, snadno se vejde na pracovní stůl.

**Pružný a výkonný**

- Pomáhá sledovat postup i při plnění dvou destiček – můžete libovolně přerušit práci a po návratu můžete začít přesně tam, kde jste skončili
- Je použitelný pro 96 a 384 pozici destičky, pro jedno i multikanálové pipety
- Jednoduchá změna z jednoho typu destičky na druhý bez dalšího příslušenství

**Materiál a výroba**

- Lehký a ergonomický.
- Možné rozšířit o stojánek na mikrozkumavky 0,5; 1,5 a 2,0ml.
- Možné nastavení optimální pozice.

**Doporučené příslušenství**

- Stojánek pro mikrozkumavky.
- Možnost rozšíření trasování i na mikrozkumavky 0,5; 1,5 a 2,0ml.

- Spínací pedál – uvolní obě ruce k práci v individuálním rytmu. Ideální řešení, pokud vám časovač nevyhovuje

Model	Objednací číslo
TRACKMAN	F70301
Stojánek pro mikroskopavky	F70105
Spínací pedál	F70261

